

## Приналежності для інфузії та трансфузії




## Міні-Спайк – канюлі аспіраційні для багаторазового взяття медикаментів



- Для звичайних флаконів об'ємом 3 – 1000 мл
- Щільно прилягаюча кришка, захищений від дотику конектор з вбудованим клапаном та повітряним фільтром, що забезпечує надійний захист від контамінації розчину.
- Зручність та гігієнічність при повторному наборі рідини
- Міні-Спайк Хемо: з повітряним фільтром, що затримує токсичні аерозолі, що утворюються при розведенні сухих субстанцій, та попереджує потрапляння в повітря маніпуляційної аерозолі з медикаментом

Найменування	Опис	Упаковка	Кат.№
	Стандартний, з антибактеріальним фільтром 0,45 мкм, для фільтрації повітря	50	4550242
	Стандартний, з антибактеріальним фільтром 0,45 мкм, для фільтрації повітря та фільтром тонкої очистки розчину 5 мкм	50	4550234
	Стандартний, з антибактеріальним та антиаерозольним фільтром 0,2 мкм, для фільтрації повітря та фільтром тонкої очистки розчину 5 мкм	50	4550340

## Міні-Спайк – зручно та швидко набирати розчин з флакону підтримуючи стерильність

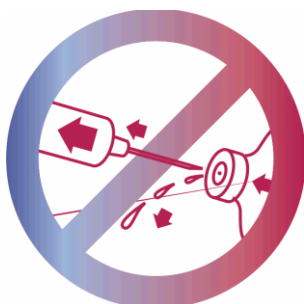

# Інфузійна система Інтрафікс Сейф Сет


Інфузійна терапія

## Інтрафікс Сейф Сет – перша інфузійна система з технологіями AirStop та PrimeStop



Унікальна інфузійна система для введення розчинів, що дозволяє швидко заповнити систему розчином не виливаючи медикамент та підтримує рівень інфузійного розчину на рівні фільтра крапельної камери – немає необхідності весь час стежити за рівнем розчину у флаконі та перезавантажувати систему, якщо рівень розчину «впав» нижче фільтра.

- Прайм-стоп – це новий захисний ковпачок з гідрофобною мембраною, яка запобігає витіканню розчину, що запобігає втратам медикаменту при заповненні системи та захищає від забруднення.
- Прайм-стоп забезпечує автоматичне заповнення лінії, при цьому розчин не потрапляє на руки, підлогу, постільну білизну.
- Айр-стоп – це унікальна повітронепроникна мембрана фільтра, яка не тільки затримує тверді домішки та нерозчинні частки, але і запобігає проникненню повітря нижче рівня фільтра.
- Завдяки Айр-стоп, при опорожненні флакону рівень розчину в системі не падає нижче рівня мембрани – не потрібно по новому заправляти систему розчином.
- Гостра прозора пластикова голка для проколу пробки флакону
- Висока прозорість крапельної камери
- Інтегрований в крапельну камеру повітропровід
- Еластична нижня частина крапельної камери
- Фільтр діаметром 15 мкм
- Роликовий регулятор швидкості інфузії
- Герметичне з'єднання з голкою чи катетером Луер-Лок

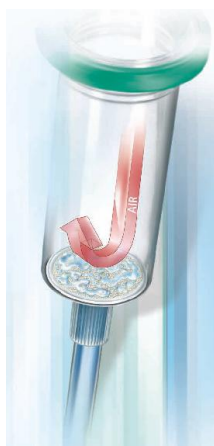

Найменування	Гравітація / тиск	Довжина (см)	Опис	Упаковка	Кат. №
Інтрафікс Сейф Сет	тиск	180		100	4063000
Інтрафікс Сейф Сет R.V.	тиск	180	Клапан зворотного току	100	4063001
Інтрафікс Сейф Сет N.T.P.	тиск	180	Нейрапур – <b>без ПВХ</b>	100	4063002
Інтрафікс Сейф Сет I.S.	тиск	180	З ін'єкційним клапаном	100	4063005
Інтрафікс Сейф Сет 3 W.S.C.	тиск	220	З 3-ходовим краном	100	4063006

**Інтрафікс Сейф Сет – економія медикаменту, економія часу**

## Екзадроп – точний регулятор швидкості для гравітаційної інфузії



Призначений для використання в ситуаціях, які вимагають безпечної, з постійною швидкістю, внутрішньовенної інфузії.

Точна швидкість, на протязі всього періоду інфузії, забезпечується за допомогою зміни жорсткого капілярного паза в пристрої регулювання.

- Просте та надійне регулювання швидкості інфузії
- Наявність на системі зажиму для короткочасного переривання інфузії
- Точне відтворення параметрів після відновлення інфузії
- Не потрібна повторне регулювання швидкості інфузії
- Герметичне з'єднання Луер-Лок
- Підтримка швидкості інфузії на постійному рівні на протязі тривалого часу
- Крапельна камера прозора, з крапельним дозатором 20 крапель/мл.

Найменування	Система	Довжина (см)	Опис	Упаковка	Кат. №
Екзадроп	+	150	Еластична ін'єкційна вставка	50	4061209
Екзадроп	+	180	Без ін'єкційної вставки	50	4061284
Екзадроп	+	210	Еластична ін'єкційна вставка	50	4061225
Екзадроп Нейтрапур	+	150	<b>без ПВХ</b>	50	4062264
Екзадроп	Без системи	54	Регулятор, що підключається до системи для внутрішньовенних інфузій	50	4061306

## Концентруйте увагу на пацієнтах, а про підтримку постійної швидкості інфузії потурбується Екзадроп

**Увага!** Шкала регулятора відкалібрована під наступні умови: введення 0,9% розчину NaCl через внутрішньовенний катетер Вазофікс (18G x 45 мм), при встановленні інфузійного флакону на висоті 76 см над пацієнтом. Зміна даних умов може призвести до зміни швидкості інфузії. Тому необхідно встановлювати швидкість порівнюючи показання шкали с даними стандартної методики (див. інструкцію).

## Дискофікс С – інфузійні крани з підвищеною механічною та хімічною стійкістю



- Забезпечення надійного венозного доступу для ін'єкцій та аспірації
- Стійкість до небезпечного впливу на матеріал інфузійних кранів лікарських засобів (наприклад жирові емульсії)
- Точне регулювання потоків завдяки тактильним відчуттям (5 позицій)
- Герметичні з'єднання Луер-Лок
- Асортимент кольорів кранів дозволяє проводити маркування ліній (синій – вена, червоний – артерія, жовтий – легенева артерія, білий – універсальний)
- Прямоточні канали, що важливо під час проведення моніторингу тиску
- Резистентність до тиску (до 4 бар)
- Герметичність поворотного механізму
- Надійна гвинтова муфта з адаптером вільного повороту навколо своєї осі


Найменування	Колір	Опис	Упаковка	Кат. №
<b>Дискофікс С-3 – трьохходові крани</b>				
Дискофікс С-3	Синій	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup>	100	16494С
Дискофікс С-3	Білий	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup>	100	16495С
Дискофікс С-3	Червоний	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup>	100	16496С
Дискофікс С-3	Жовтий	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup>	100	16497С
<b>Дискофікс С-3 – трьохходові крани з подовжувачами</b>				
Дискофікс С-3	Синій	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup> , подовжувач 10 см	50	16500С
Дискофікс С-3	Синій	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup> , подовжувач 25 см	50	16520С
Дискофікс С-3	Синій	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup> , подовжувач 50 см	50	16540С
Дискофікс С-3	Синій	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup> , подовжувач 75 см	50	16551С
Дискофікс С-3	Синій	3-ходовий кран 360 <sup>0</sup> , подовжувач 100 см	50	16560С



**Дискофікс С – надійно, герметично, зручно**

## Стерифікс – інфузійні фільтри

- Фільтр 0,2 мкм
- Затримує бактерії та тверді частинки
- Надійна затримка та видалення повітря з інфузійної лінії незалежно від положення фільтра
- Швидке заповнення завдяки автоматичній вентиляції
- Герметичні з'єднання Луер-Лок

Найменування	Площа фільтра	Об'єм заповнення	Без ПВХ	Упаковка	Кат. №
 Стерифікс	10,0 см <sup>2</sup>	2,40 мл		50	4099303
 Стерифікс Пед	4,3 см <sup>2</sup>	0,70 мл		50	4099354
 Стерифікс Неонат	1,65 см <sup>2</sup>	0,55 мл	•	50	4099257

## Заглушки

Найменування	Опис	Колір	Упаковка	Кат. №
 Комбі-стоппер	заглушка	червоний	1000	4495101
 Комбі-стоппер	заглушка	синій	1000	4495152
 Комбі-стоппер	заглушка	білий	1000	4495209
 Захисний ковпачок	заглушка Луер-Лок	білий	1000	4097076
 Ін-стоппер	заглушка, закритий конектор Луер-лок з латексною мембраною для проколу голкою	жовтий	1000	4238010

# Подовжувачі та з'єднувальні лінії

Інфузійна терапія

Найменування	Довжина	Об'єм заповнення	Ø мм	Матеріал	Опис	Упаковка	Кат. №
<b>Гейдельберзькі подовжувачі</b>							
	30 см	2,1 мл	3,0 мм	ПВХ	Луер-Лок	100	4097300
	75 см	5,3 мл	3,0 мм	ПВХ	Луер-Лок	100	4097173
	100 см	7,1 мл	3,0 мм	ПВХ	Луер-Лок	100	4097262
	140 см	10,6 мл	3,0 мм	ПВХ	Луер-Лок	100	4097408
	200 см	14,1 мл	3,0 мм	ПВХ	Луер-Лок	100	4097190
	320 см	22,6 мл	3,0 мм	ПВХ	Луер-Лок	100	4097130


<b>Оригінальні подовжувачі Перфузор</b>							
	50 см	0,4 мл	1,0 x 2,0	ПЕ		100	8255059
	50 см	0,9 мл	1,5 x 2,7	ПВХ		100	8255172
	75 см	0,5 мл	0,9 x 1,9	ПВХ		100	8722870
	75 см	0,5 мл	0,9 x 1,9	ПВХ	3 Венофікс 25G	100	8722889
	100 см	0,8 мл	1,0 x 2,0	ПЕ		100	8255067
	150 см	1,0 мл	0,9 x 1,9	ПВХ		100	8255504
	150 см	1,2 мл	1,0 x 2,0	ПЕ	Педіатричний	100	8722935
	150 см	1,2 мл	1,0 x 2,0	ПЕ	Чорний	100	8723010
	150 см	2,6 мл	1,5 x 2,7	ПВХ	Стандарт	100	8722960
	150 см	2,6 мл	1,5 x 2,7	ПВХ	Чорний	100	8722919
	150 см	2,6 мл	1,5 x 2,7	ПВХ	3 конектором Сейфсайт	100	8722820
	200 см	1,6 мл	1,0 x 2,0	ПЕ		100	8723060
	200 см	3,5 мл	1,5 x 2,7	ПВХ		100	8722862
	200 см	3,8 мл	1,5 x 2,7	ПВХ	Фільтр 0,2 мкм	100	8723001
	250 см	2,0 мл	1,0 x 2,0	ПЕ		100	8272565
	250 см	4,4 мл	1,5 x 2,7	ПВХ		100	8255490
300 см	5,3 мл	1,5 x 2,7	ПВХ		100	8255253	

## Інфузійні розгалужувачі

Найменування	Довжина	Об'єм	Внутр. Ø	Опис	Упаковка	Кат. №
ЛС-2	15 см	1,6 мл	3,0 мм	2 гнучких коннектора	100	4097122
ЛС-4	35 см	4,5 мл	3,0 мм	4 гнучких коннектора	100	4097149
ЛС-5	35 см	2,5 мл	3,0 мм	5 жорстких коннекторів, Ін-стоппер, роликовий захим	100	4097157



## Цито-Сет – система для безпечного приготування та введення цитостатичних препаратів

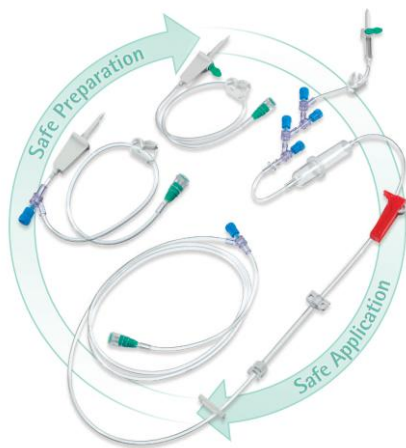

- Замкнута система від приготування розчину та його введення до моменту утилізації
- Повністю виключений контакт з цитостатичними препаратами
- Використання лише безголкових з'єднань
- Не містить полівінілхлориду (ПВХ) та латексу
- Конектори Сейф-Сайт попереджує протікання препарату та випадковий укол голкою
- Ковпачок Прайм-стоп виключає ризик витікання препарату при заповненні та підключенні лінії
- Цито-Сет Мікс – системи для приготування розчину препарату
- Цито-Сет Інфузія та Цито-Сет Інфузомат – системи для введення розчину препарату

Найменування	Опис	Упаковка	Кат. №	
<b>Приготування розчину</b>				
	Цито-Сет Мікс	З'єднувальна система з ін'єкційним портом Сейф-Сайт	20	A2901N
	Цито-Сет Мікс	З'єднувальна система без ін'єкційного порту Сейф-Сайт	20	A2581NF
<b>Введення розчину</b>				
	Цито-Сет Інфузія	Інфузійна система для гравітаційної інфузії з 3 ін'єкційними портами Сейф-Сайт	20	A1686
	Цито-Сет Інфузомат	Інфузійна система для інфузії під тиском (за допомогою інфузійного насосу) з 3 ін'єкційними портами Сейф-Сайт	20	8250910



**Цито-Сет – безпека медичного персоналу при роботі з цитостатичними препаратами**





**ТОВ «Б.Браун Медікал Україна»**

03067 м. Київ,  
бул. І.Лепсе, 4, БЦ «Сільвер Центр»  
тел./факс (044) 351-11-30

[www.bbraun.com](http://www.bbraun.com)

<b>м. Дніпропетровськ</b>	<b>(067) 445-90-22</b>
<b>м. Донецьк</b>	<b>(067) 445-89-96</b>
<b>м. Львів</b>	<b>(067) 234-02-39</b>
<b>м. Київ</b>	<b>(067) 445-89-97</b>
	<b>(067) 234-02-38</b>
<b>м. Одеса</b>	<b>(067) 234-02-35</b>
<b>м. Харків</b>	<b>(067) 445-89-94</b>